



THUASNE

Genuimmo 0°

- fr** Attelle d'immobilisation du genou à 0°
- en** Knee immobilisation splint at 0°
- de** Schiene zur Ruhigstellung des Knies in einem 0°-Winkel
- nl** Immobilisatiebrace voor de knie op 0°
- it** Tutore di immobilizzazione per il ginocchio a 0°
- es** Férula de inmovilización de la rodilla a 0°
- pt** Tala para imobilização do joelho em 0°
- da** Immobiliserende knæskinne ved 0°
- fi** Immobilisoiva polvituki, taivutus 0°
- sv** Immobiliseringsskena för knät 0°
- el** Νάρθηκας ακινητοποίησης γονάτου σε κάμψη 0°
- cs** Imobilizační ortéza kolene 0°
- pl** Orteza do unieruchomienia kolana pod kątem 0°
- lv** Ceļgala imobilizācijas sāite 0°
- lt** Kelio imobilizavimo 0° padėtyje įtvartas
- et** Põlve fikseerimise lahas 0° juures
- sl** Opornica za imobilizacijo kolena s kotom 0°
- sk** Imobilizačná kolenná ortéza pri 0° uhle
- hu** Oldalsínes térdrögzítő 0°-os szög
- bg** Шина за имобилизация на коляно на 0°
- ro** Atelă pentru imobilizarea genunchiului la 0°
- ru** Шина для имобилизации коленного сустава под углом 0°
- hr** Udlaga za imobilizaciju koljena, 0°
- zh** 0° 膝关节固定夹板
- ar** جبيرة لتثبيت الركبة على زاوية صفر درجة



		< 175 cm	> 175 cm
	S	35 - 45 cm	x
	M	45 - 52 cm	
	L	53 - 62 cm	
	XL	63 - 75 cm	









THUASNE
 120, rue Marius Auphan
 92300 Levallois-Perret - France

© Thuasne - 6165101 (2020-12) © Studio Caterin

www.thuasne.com

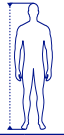DM210443

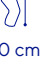		< 175 cm	> 175 cm
	S	35 - 45 cm	x
	M	45 - 52 cm	
	L	53 - 62 cm	
	XL	63 - 75 cm	
		50 cm	







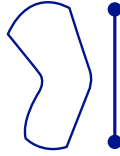
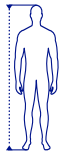


fr	Taille patient	Circonférence cuisse	Hauteur	Immobilisation
en	Patient height	Thigh circumference	Height	Immobilisation
de	Größe des Patienten	Oberschenkelumfang	Höhe	Ruhigstellung
nl	Maat van de patiënt	Dijomtrek	Hoogte	Immobilisatie
it	Altezza del paziente	Circonferenza coscia	Lunghezza	Immobilizzazione
es	Tamaño del paciente	Circunferencia del muslo	Altura	Inmovilización
pt	Tamanho do paciente	Circunferência da coxa	Altura	Imobilização
da	Patientens højde	Lårets omkreds	Højde	Støtte
fi	Potilaan koko	Reiden ympärysmitta	Korkeus	Immobilisoi
sv	Patientens storlek	Omkrets runt lår	Höjd	Immobilisering
el	Μέγεθος ασθενούς	Περιφέρεια μηρού	Ύψος	Ακινητοποίηση
cs	Výška pacienta	Obvod stehna	Délka	Znehybnění
pl	Rozmiar pacjenta	Obwód uda	Wysokość	Unieruchomienie
lv	Pacienta augums	Augšstilba apkārtmērs	Augstums	Imobilizācija
lt	Paciento dydis	Šlaunies apimtis	Aukštis	Imobilizavimas
et	Patsiendi suurus	Reie ümbermõõt	Kõrgus	Liikumatuks muutmine
sl	Velikost pacienta	Obseg stegna	Višina	Imobilizacija
sk	Veľkosť pacienta	Obvod stehna	Výška	Imobilizácia
hu	A beteg mérete	Comb körmérete	Magasság	Rögzítés
bg	Размер на пациента	Бедрена обиколка	Височина	Обездвиждане
ro	Talia pacientului	Circumferința coapsei	Înălțime	Imobilizare
ru	Размер пациента	Окружность бедра	Высота	Иммобилизация
hr	Veličina pacijenta	Promjer bedra	Visina	Imobilizacija
zh	患者身高	大腿圍	高度	固定
ar	مقاس المريض	محيط الفخذ	الارتفاع	التثبيت



fr	Dispositif médical	Un seul patient - à usage multiple	Lire attentivement la notice	Avertissement important
en	Medical device	Single patient - multiple use	Read the instruction leaflet carefully	Important warning
de	Medizinprodukt	Einzelner Patient - mehrfach anwendbar	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch	Wichtige Warnung
nl	Medisch hulpmiddel	Eén patiënt - meervoudig gebruik	Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door	Belangrijke waarschuwing
it	Dispositivo medico	Singolo paziente - uso multiplo	Leggere attentamente le istruzioni	Avviso importante
es	Producto sanitario	Un solo paciente - uso múltiple	Leer atentamente las instrucciones	Advertencia importante
pt	Dispositivo médico	Paciente único - várias utilizações	Ler atentamente o folheto	Aviso importante
da	Medicinsk udstyr	Enkelt patient - flergangsbrug	Læs brugsanvisningen omhyggeligt	Vigtig advarsel
fi	Lääkinnällinen laite	Potilaskohtainen - voidaan käyttää useita kertoja	Lue käyttöohje huolellisesti	Tärkeä varoitus
sv	Medicinteknisk produkt	En patient - flera användningar	Läs bipacksedeln noga före användning	Viktig varning
el	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Πολλοπλή χρήση - σε έναν μόνο ασθενή	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης	Σημαντική προειδοποίηση
cs	Zdravotnický prostředek	Jeden pacient - vícenásobné použití	Pozorně si přečtěte návod	Důležité upozornění
pl	Wyrób medyczny	Wielokrotne użycie u jednego pacjenta	Należy dokładnie przeczytać instrukcję	Ważne ostrzeżenie
lv	Medicīniska ierīce	Viens pacients - vairākkārtēja lietošana	Rūpīgi izlasiet norādījumus	Svarīgs brīdinājums
lt	Medicinos priemonė	Vienas pacientas - daugkartinis naudojimas	Atidžiai perskaitykite instrukciją	Svarbus įspėjimas
et	Meditsiiniseade	Ühel patsiendil korduvalt kasutatav	Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult	Oluline hoiatus
sl	Medicinski pripomoček	En bolnik - večkratna uporaba	Pozorno preberite navodila	Pomembno opozorilo
sk	Zdravotnícka pomôcka	Jeden pacient - viacsobné použitie	Tento návod si pozorne prečítajte	Dôležité upozornenie
hu	Orvostechikai eszköz	Egyetlen beteg esetében többször felhasználható	Figyelmesen olvassa el a betegájékoztatót	Fontos figyelmeztetés
bg	Медицинско изделие	Един пациент - многократно употреба	Прочетете внимателно листовката	Важно предупреждение
ro	Dispozitiv medical	Un singur pacient - utilizare multiplă	Citiți cu atenție prospectul	Avertisment important
ru	Медицинское изделие	Многократное использование для одного пациента	Внимательно прочтите инструкцию	Важное предупреждение
hr	Medicinski proizvod	Jedan pacijent - višestruka uporaba	Pažljivo pročítajte priručnik	Važna obavijest
zh	醫療器械	一位患者-多次使用	仔細閱讀說明書	重要警告
ar	جهاز طبي	لمريض واحد - متكرر الاستعمال	اقرأ بعناية هذا الدليل	تحذير هام



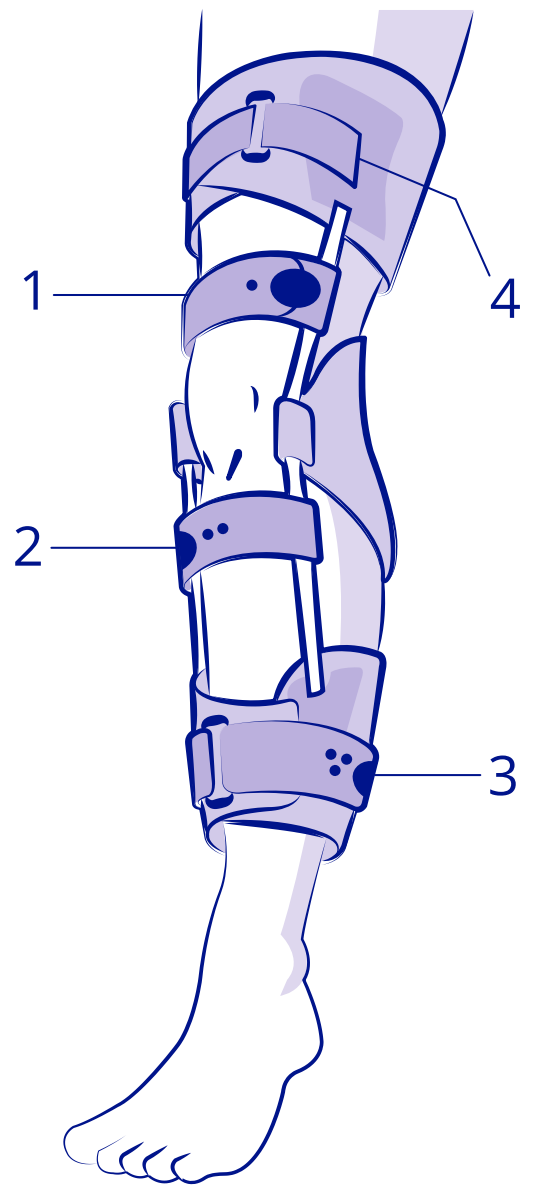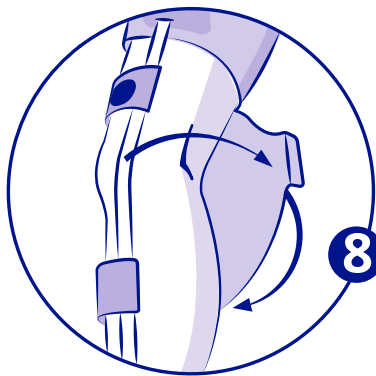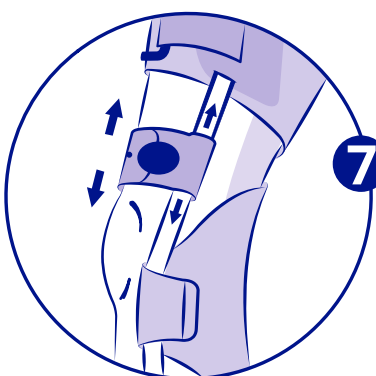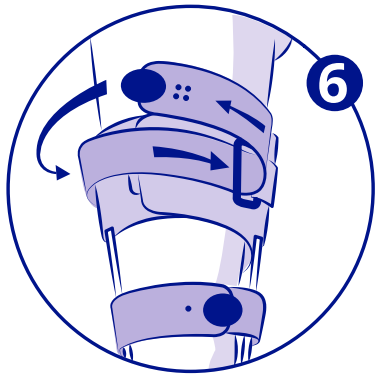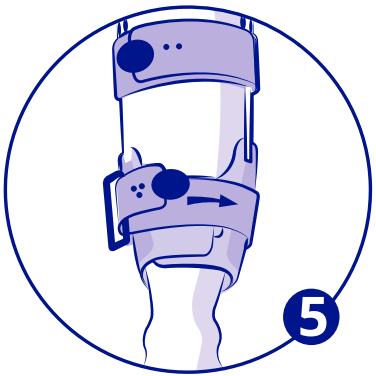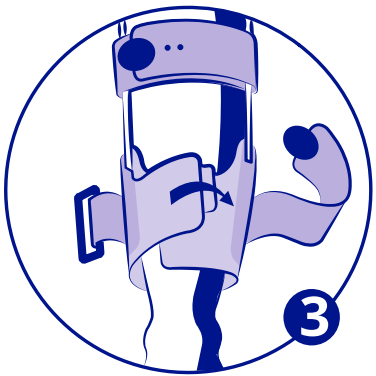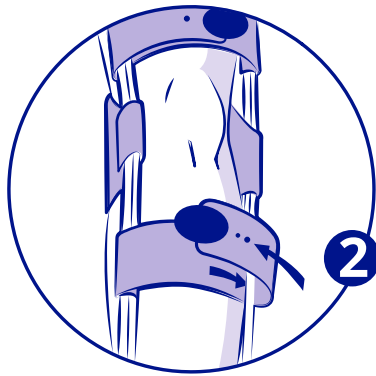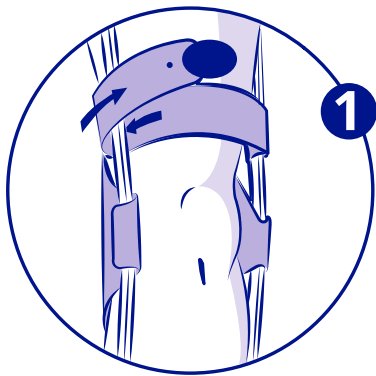

www.thuasne.com
www.thuasne.com/global-contact

