

- PEDIDO
- PRESUPUESTO



IDENTIFICACIÓN DEL MINORISTA

Código Cliente: \_\_\_\_\_

Nombre del prescriptor: \_\_\_\_\_

Apellido del paciente : \_\_\_\_\_

Nombre del paciente : \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento : \_\_\_\_\_

Dirección : \_\_\_\_\_

Nº de expediente para reposición : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Talla del paciente : \_\_\_\_\_

Sexo :  M  F  Niño

1er tratamiento Cantidad: \_\_\_\_\_

**En la medida que sea posible, sírvase adjuntar fotografías del miembro en el cual se debe aplicar el dispositivo.**  
**No realizamos dedos en linfología, excepto el pulgar.**

**Si desea los dedos, le agradecemos presentar su solicitud en Cicatrix® (Ficha mano nº 3)**

⚠ Precisión con respecto a la toma de medidas para el largo del manguito.

**La mano debe estar posicionada sobre el muslo. Posicionar correctamente las referencias anatómicas solicitadas antes de tomar las medidas.**

Largo entre la muñeca y el codo ④ ⑤ : partir desde el centro de la muñeca para llegar hasta la punta del codo; por lo tanto hay un efecto de rotación de la cinta de medir.

Para el largo entre el codo y el acromion ③ ④, posicionar correctamente la cinta de medir en el exterior del brazo partiendo de la punta del codo para juntarse con la cabeza del acromion. Para la mano, dibujar la extremidad del manguito y rayar la zona cubierta por la órtesis para continuar con la toma de medidas.

**Modelo**

- Manguito simple
- Manguito con guantelete y pulgar
- Manguito con guantelete sin pulgar
- Guantelete sin pulgar
- Guantelete con pulgar

**Clase de compresión**

- 15 - 20 mmHg
- 20 - 36 mmHg
- > 36 mmHg

**Terminación extremidad proximal**

- Elástico simple (para manguito simple, medida «5»)
- Elástico antideslizante (para manguito simple, medida «5»)
- Antideslizante silicona hombre (para manguito simple, medida «5»)
- Encaje antideslizante silicona mujer (para manguito simple, medida «5»)
- Antideslizante látex (para manguito simple, medida «5») solamente en caso de irritación con la silicona
- Extensión de hombro (pasador de sujetador, hasta la medida «G»)
- Extensión de hombro con cinturón (hasta la medida «H»)

Comentarios :

Circunferencias (cm)		izquierda	derecha
a	Circunf. desde la muñeca hasta su parte más estrecha		
b	Circunf. en el punto equidistante entre la muñeca y el codo. Si el edema es muy localizado, el punto 2 pasa a ser el borde inferior del edema.		
c	Circunf. en el pliegue del codo		
d	Circunf. en el punto más grueso del bíceps		
e	Circunf. del brazo a la altura del pliegue axilar		
f	Circunf. del acromion pasando por la axila		
g	Circunf. pasando por la axila y el punto G		
h	Circunf. torácica del acromion pasando por la axila opuesta		


  

Alturas		izquierda	derecha
l2	Desde la muñeca hasta el punto 2		
l3	Desde la muñeca hasta el codo (1 a 3)		
l4	Desde la muñeca al punto más grueso del bíceps (1 a 4)		
l5	Desde la muñeca hasta la altura del pliegue axilar (1 a 5)		
l6	Desde el pliegue axilar hasta el acromion		
l7	Desde el acromion hasta el tirante de sujetador		

Alturas		izquierda	derecha
l0	Largo del pulgar (1 cm mini)		
l1	Desde la muñeca hasta la base del pulgar (1 a k)		
l8	Distancia entre la 1a comisura y la cabeza de los metacarpianos (2 cm mini)		
l9	Desde la muñeca hasta la extremidad del manguito		

Circunferencias (cm)		izquierda	derecha
i	Circunf. desde la mano hasta el nivel de la cabeza de los metacarpianos		
j	Circunf. en la extremidad del pulgar		
k	Circunf. en la base del pulgar		

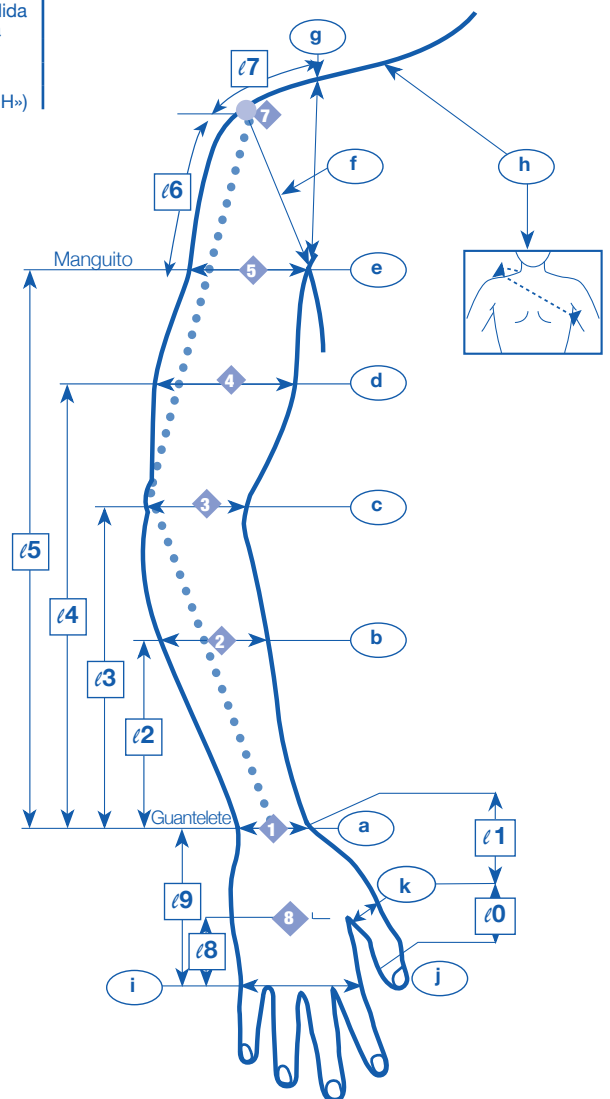

◆ referencias anatómicas ○ circunferencia □ largo

⚠ i+j = max. 34 cm